

ヘッドの吸引口から唾液や汚れを吸い込みながら口腔ケア

# 吸引歯ブラシ キューテクト®

- ・むせたり誤嚥が心配で思い通りに歯みがきができない方
- ・寝たきりで歯みがきができない方
- ・看護や介護の場で歯みがきが必要な方

そんなお悩みにお応えできるのが  
**吸引歯ブラシ キューテクト®**です

鹿児島大学との共同研究で開発しました。

吸引器と接続する事でブラッシングと同時に口の中の余分な水分などを吸引し、お子様からお年寄りまで幅広い世代で誤嚥を防ぎながらやさしく歯みがきができます。


Lサイズ

約9ミリ  
約20ミリ

Sサイズ

約8ミリ  
約15ミリ

★Sサイズはお子様の狭い口内でも磨きやすいコンパクトサイズ

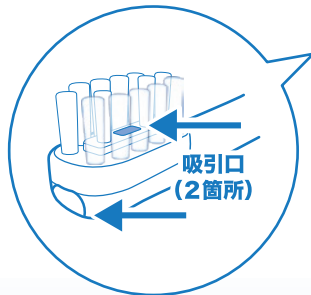

小さいヘッドで狭い口内でも磨きやすい

ポータブル吸引器に接続するだけで使える

ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎ  
やさしく歯みがきができる

吸引カテーテル  
8Fr~12Fr

ジョイントの  
奥まで差し込む



\* 吸引歯ブラシ キューテクト®のパッケージには吸引歯ブラシとジョイント(各1)が入っています  
吸引カテーテルを吸引歯ブラシ+ジョイントの奥まで差し込んでご使用ください



S・L共に3色あります

	原料樹脂	耐熱温度
柄部	ABS樹脂	80℃
毛部	ナイロン	80℃
ジョイント部	シリコンゴム	160℃
毛の硬さ: やわらかめ		

\* 吸引カテーテルは8Fr~12Frのサイズ間でご使用いただけます

- 吸引歯ブラシを袋から取り出し、吸引器に接続してください。
- ブラシをコップの水にひたし、毛先に水を含ませてから口腔ケアを行ってください。
- 唾液の溜りやすいお口の奥は歯ブラシの先端部から吸うと吸引しやすいです。
- 固形物等を吸引すると、吸引口が詰まるおそれがありますのでご注意ください。
- 高温殺菌はできません。



株式会社 オールウェイズ 新潟県燕市井土巻4-137

always-gd.jp 検索